


# GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN BPK


1

## DESEMPAQUE SU BÁSCULA

- a Levante la tapa superior de cartón.
- b Retire el plato de la caja.
- c Retire el módulo, de la caja.

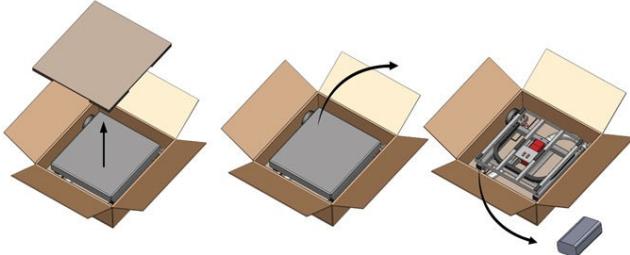

- d Corte cinchos de ruedas, respaldo y retire plataforma de la caja de cartón.

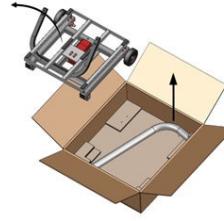

- e Por último corte cinchos de torreta y retire de caja junto con los tornillos la llave, eliminador y soporte de torreta.



### f Lista de Partes

\*Tornillo cabeza hexagonal 3/8" x 1 1/2" (4)

\*Tornillo cabeza hexagonal 3/8" x 2 1/2" (2)


\*Tuerca 3/8" (4)

\*Llave para Tornillo 3/8"

\*Soporte de Torreta

\*Plato

\*Torreta

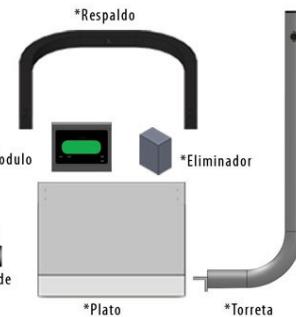

2

## CONECTE EL MÓDULO A LA TORRETA

- a Inserte soporte de módulo en torreta. A continuación coloque módulo en soporte.
- b Conecte el cable del módulo a la torreta haciendo coincidir en las flechas.
- c Ajuste soporte con la perilla.




3

## ENSAMBLE LA TORRETA A LA PLATAFORMA

- a Introduzca la terminal ojo de torreta en un tornillo y ajuste la torreta con la plataforma 3/8" x 2 1/2" utilizando la llave hexagonal 3/8" incluida.




- b Despues de atornillar la Torreta con la plataforma conecte la terminal de la torreta con la terminal de la plataforma.

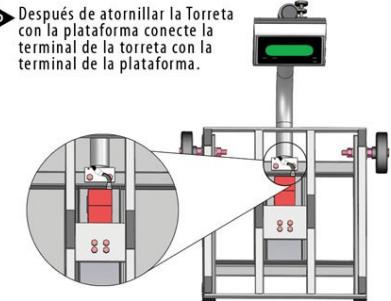

4

## ENSAMBLE DE RESPALDO CON PLATO

- a Coloque los Tornillos cabeza hexagonal 3/8" x 1 1/2" y ajuste con tuercas como se indica utilizando la llave 3/8" incluida para ensamblar el plato con el respaldo.

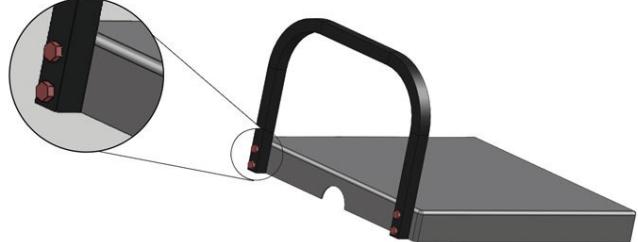

5

## ENSAMBLE DE SU BÁSCULA

- a Coloque el plato con el respaldo sobre la plataforma como se indica.



- b Su báscula esta lista para ser utilizada




COD. 13100943 RO

# BPK QUICK SETUP GUIDE


1

## UNPACK YOUR SCALE

- a Lift the superior cardboard.
- b Remove the plate from the box.
- c Remove the module from the box.

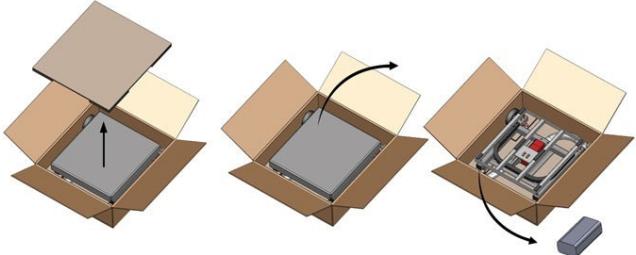


- d Cut the plastic strap from the wheels and the handrail, then remove the platform from the package.

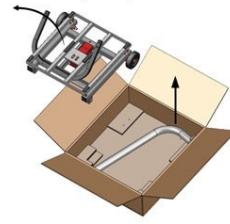

- e Finally, cut the plastic strap from the turret and remove it from the box along with the screws, wrench, the power supply and the turret support.



f Part list:

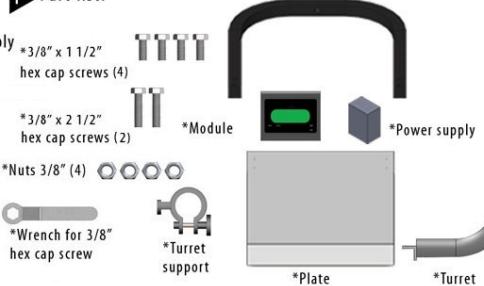

2

## CONNECT THE MODULE TO THE TURRET


- a Insert the module support on to the turret. Then, place the module on the support.
- b Connect the module's cable to the turret by making the arrows match.
- c Adjust the support with the knob




3

## ASSEMBLY THE TURRET TO THE PLATFORM

- a Screw the turret to the platform with the  $3/8'' \times 2 \frac{1}{2}''$  hex cap screw using the  $3/8''$  wrench included.

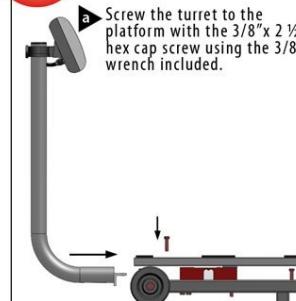


- b After attaching the turret to the platform, connect the turret connector to the platform plug.

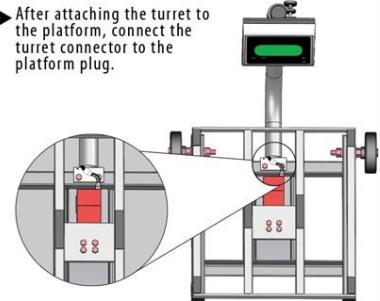

4

## ASSEMBLY OF HANDRAIL WITH PLATE

- a Install the  $3/8'' \times 1 \frac{1}{2}''$  hex cap screws as shown using the  $3/8''$  wrench (included) and adjust with the nuts to assembly the handrail with the plate.

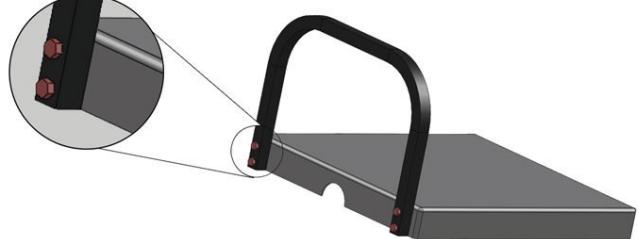

5

## ASSEMBLY OF YOUR SCALE

- a Put the plate with the handrail over the platform as shown.



- b Your scale is ready to use.



COD. 13100943 RO